




anthos.com

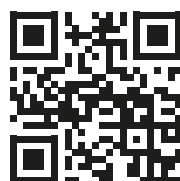

BU MEDICAL EQUIPMENT
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
HEADQUARTERS Cefla s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

STABILIMENTO
PLANT

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601



Making Your Life Better.



07/2025 ACL5TD251S00
Die angeführten technischen Eigenschaften können im Rahmen einer ständigen technologischen Optimierung ohne Vorankündigung eventuellen Änderungen unterzogen werden.
Gemäß den geltenden Vorschriften können einige Produkte und/oder Eigenschaften in den Nicht-EU-Ländern andere Verfügbarkeiten und Eigenarten aufweisen. Nehmen Sie bitte mit unserem örtlichen Vertreter Kontakt auf.



DE

**Anthos
Classe A5**

CONTINENTAL
INTERNATIONAL
EINZELNE
WASSEREINHEIT
CART
EINZELNER CART

**th
ink**

th ink

think easy.

Ein ebenso einfaches wie effizientes, anwenderfreundliches und dermaßen flexibles Konzept für fachspezifische Zahnbehandlungen durch die Integration von Instrumenten, Geräten und Funktionen.

think forward.

Zukunftsorientiertes Denken bedeutet, dass man auf ein flexibles, zuverlässiges Modell zählen kann, das die verschiedenen klinischen Anforderungen durch konkrete Lösungen erfüllt.

think wellness.

Nicht nur komfortabel durch das Design des Behandlungsstuhls oder die Anwendungsergonomie, sondern auch sicher durch die Bereitstellung von automatischen und zertifizierten Hygienesystemen zum Schutz des Patienten und der Behandler.



**Anthos
Classe A5.**

Klare Informationen und intuitive Funktionen

LCD TOUCH


Classe A5 verfügt über ein LCD-Farb-Touch-Display. Alle Funktionen der Behandlungseinheit werden durch einfache Gesten gesteuert und die an den Zahnarzt weitergegebenen Informationen sind klar und vollständig. Der Zugriff auf die Einstellungen der einzelnen

Instrumente, des Behandlungsstuhls und der integrierten Geräte gestaltet sich schnell und intuitiv, das Layout der Konsole ist besonders lesefreundlich und umfasst zahlreiche hochentwickelte Funktionen.

Glasgeschütztes Display.

Durch das Deckglas der Konsole lässt sich die Oberfläche leicht und sicher desinfizieren.

Multiprofil. Höchste Anwendungsvielfalt durch das Speichern von Automatismen des Mundglas-Speischalensystems, der bevorzugten Arbeitspositionen und der Einstellungen für die Verwendung der einzelnen Instrumente, für bis zu maximal 4 Benutzer. Nützliche Funktion für multiprofessionelle Praxen oder für Kliniken mit häufigem Arztwechsel.

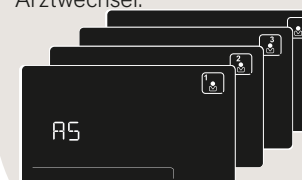

CLEAN


Clean. Funktion, die den Betrieb des Bedienfeldes während der Reinigung der Glasfläche der Bedienkonsole unterbindet, um ein unbeabsichtigtes Betätigen der Bedienelemente zu vermeiden.

CLEAN



Endo. Dank des als Option erhältlichen Mikromotors i-MMs hat der Zahnarzt Zugriff auf alle integrierten endodontischen Funktionen, die sich über die zur Ausstattung der Behandlungseinheit gehörige Bedienkonsole steuern lassen.

ENDO

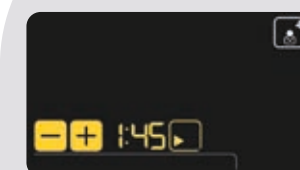

Chronometer. Mit dieser Funktion lassen sich Vorgänge mit erforderlicher Prüfung der Anwendungszeit, beispielsweise bei der Verwendung von Ätzzellen oder Kompositen, leicht unter Kontrolle halten.



Leistungsstarke Instrumente

Dank der Leistungen der integrierten Instrumente macht es Classe A5 dem Zahnarzt möglich, jede Behandlung entspannt anzugehen. Die Bedienkonsole ermöglicht das Steuern der einzelnen Nutzungsweisen und dank der Bedienelemente können die Anwendungsparameter der Instrumente angepasst und die eigenen Präferenzen über das LCD-Display aufgerufen werden.

Für die konservierende Behandlung können die Turbinendrehzahl des Mikromotors und der jeweils verwendete Winkelstücktyp unter Bereitstellung von sofort lesbaren Nutzungsinformationen in Echtzeit eingestellt werden.

POTENZIAL



Instrumente für jeden Bedarf, von den leichten und ergonomischen Mikromotoren bis hin zur HD-Kamera mit flachem Kopf und kapazitiver Taste zur Vereinfachung der Freeze-Frame-Funktion. Eine Auswahl an hochwertigen Handstücken, die dem Zahnarzt jeden zahnärztlichen Fachbereich erschließen lassen.



Mikromotoren FLUO. Durch das für beide Mikromotoren als Option erhältliche fluoreszierende LED-Licht wird der Verbundwerkstoff hervorgehoben.



Mikromotoren. Zwei Versionen: i-MMr (3,3 Ncm) ohne und mit LED; i-MMs (5,3 Ncm) mit LED-Beleuchtung und Vorbereitung für endodontische Behandlungen. Beide mit 100 bis 40.000 U/min.



Zahnsteinentferner. Mit den besten handelsüblichen Spitzen kompatible Handstücke mit oder ohne LED. Im ENDO-Modus stellen sie bei Wurzelkanalbehandlungen ein wertvolles Instrument dar.



Turbinen und Winkelstücke. Dem Zahnarztprofi steht eine große Auswahl an spezifischen Turbinen und Winkelstücken zur Verfügung, die für alle zahnärztlichen Leistungen geeignet sind.



Spritzen. Sie sind mit 3 und mit 6 Funktionen erhältlich und zeichnen sich durch eine ergonomische Form aus. Der Spritzenkörper aus Metall und die in gerader und abgewinkelter Version erhältliche Kanüle sind abnehmbar und autoklavierbar.



T-LED. T-LED bietet ein breites Emissionsspektrum für die Aktivierung von Kompositen der jüngsten Generation, einen drehbaren Griff, eine intuitive Schnittstelle und ein zu den 7 verfügbaren Programmen zählendes Bracket-Programm mit 5 kurzen Emissionen.



HD-Kamera. An der C-U2 mit Glas-Optik und LED-Diffusor ist ein 16:9 HD-Sensor integriert, der hochauflösende klinische Bilder aufnehmen kann.

Integrierte klinische Leistungen

ENDODONTIE

An Classe A5 steht dem Zahnarzt ein optionales System für die integrierte Endodontie zur Verfügung, das die Ergonomie der Wurzelkanalbehandlungen optimiert. Das System umfasst einen bürstenlosen Mikromotor mit Autostop-,

Autoreverse- und Autoforward-Funktion. Der ebenfalls integrierte und über die Software der Behandlungseinheit gesteuerte elektronische Apexlokalisator stellt eine wertvolle Unterstützung für endodontische Behandlungen dar.



Mikromotor i-MMs.

Leicht, kompakt und vollständig autoklavierbar. Genaue und präzise Drehmomenteinstellung. Integrierte LED-Beleuchtung.




Winkelstück.

EVO E4 mit einem Untersetzungsverhältnis von 4:1 ist autoklavierbar und thermodesinfizierbar. Der Miniaturkopf erleichtert den Zugang zu den schwerer erreichbaren Behandlungsbereichen.



Endodontie. Während der endodontischen Behandlung zeigt die LCD-Farbkonsole die wichtigsten Daten an, die für den Zahnarzt von Nutzen sind, da sie ihm einen vollständigen Überblick über die Behandlung verschaffen. Alles Notwendige für eine endodontische Behandlung ist im Instrumententräger integriert.

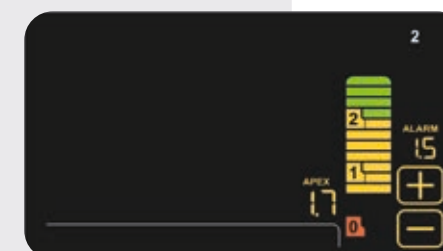

Apexlokalisator. Während des Einsatzes der Instrumente für die Wurzelkanalbehandlung wird der Abstand zum Apex auf dem LCD-Display angezeigt. Die Annäherung an den Apex wird von der ENDO-Software festgestellt. Wenn der Apex erreicht ist, wird die Drehung des Mikromotors von der Apex-Stop-Funktion unterbrochen.



KONSERVIERENDE ZAHNBEHANDLUNG

Mikromotoren mit FIT-Technologie.

Neben den Verbesserungen zur Gewichts- und Geräuschreduzierung sind die Anthos-Mikromotoren jetzt auch mit FIT (Fluorescence-aided Identification Technique)-Technologie erhältlich, mit der in den Zähnen vorhandene Verbundwerkstoffe erkannt werden. Durch die Aktivierung des im Mikromotor integrierten fluoreszierenden LED-Lichts werden die mit Verbundwerkstoffen behandelten Teile des Zahns hervorgehoben. Bei einer Zahnbehandlung mit altem Komposit wird dem Zahnarzt dadurch eine visuelle Unterstützung geboten, die ihm kürzere Eingriffszeiten und ein präzises und sicheres Arbeiten ermöglichen. Darüber ist diese Technologie auch ein hervorragendes Hilfsmittel bei der Zahninspektion, da der vorhandene Verbundwerkstoff klar zu erkennen ist.



Für die Kieferorthopädie und ästhetische Behandlungen. Am Ende einer Therapie mit festsitzenden Apparaturen gestaltet sich das Entfernen der Brackets einfacher und effizienter, wenn der Verbundwerkstoff durch das vom Mikromotor ausgestrahlte fluoreszierende LED-Licht gut hervorgehoben wird. Beim Entfernen von Verbundwerkstoff, der zur Fixierung von unsichtbaren Attachments genutzt wird, erweist sich das fluoreszierende LED-Licht zu dessen Hervorhebung als extrem nützlich. Der Zahnarzt kann mit größerer Sicherheit eingreifen, da er sich gewiss sein kann, dass keine Spuren des Komposits auf dem Zahn zurückbleiben.



Abgestimmter Komfort

Das Design des Behandlungsstuhls bietet dem Zahnarzt eine optimale Arbeitsergonomie und dem Patienten den höchsten Komfort. Die Polsterungen, die mit den als optionales Zubehör erhältlichen Arbeitsstühlen kombinierbar sind, zeichnen sich durch eine hohe

Beständigkeit und eine nahtlose Fertigung aus und sind in 19 verschiedenen Farben erhältlich. Die optionalen Memory Foam-Polsterungen bieten dem Patienten ein einzigartiges Gefühl von Komfort und Wohlbefinden.

WOHLBEFINDEN




Rückenlehnen. Die Auswahl zwischen drei Arten von Rückenlehnen, d.h. schmale Form, breite Form und Rückenlehne Nordic, ist die Antwort auf die zahlreichen ergonomischen Anforderungen des Zahnarztes. Der Patientenkomfort ist stets gewährleistet und der Zugang ist bequem möglich.



Sensor für Anwesenheit des Patienten.

Der Behandlungsstuhl kann optional mit einem Sensor ausgestattet werden, der die Anwesenheit des Patienten erkennt und in Verbindung mit der Standby-Funktion den Energieverbrauch reduziert, wenn der Behandlungsstuhl effektiv nicht genutzt wird.

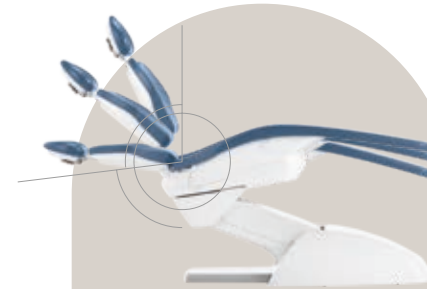

ISO-JOINT-Ergonomie.

Dank der neuen ISO-JOINT-Geometrie optimiert die kompensierte Rückenlehnen-/Sitzbewegung den Komfort und verringert das Rutschen des Kopfes des Patienten.



Höhenverstellung und Tragfähigkeit.

Die großzügige Höhenverstellung, 37-80 cm, erhöht den Arbeitskomfort und ermöglicht selbst älteren Patienten einen bequemen Zugang. Der Behandlungsstuhl ist für das Heben für Patienten mit einem Körpergewicht bis zu 190 kg zugelassen.

Standard	142	141	144	102	113	106	136	135	115	132
Memory Foam	172	171	174	198	183	196	186	194	195	192
Standard	143	140	134	103	123	101	137	121	130	
Memory Foam	173	170	184	182	193	197	187	199	180	

FARBEN

142	172	Anatolische Haselnuss
141	171	Papyrusbeige
144	174	Rubinrot
102	198	Atlantikblau
113	183	Pazifikblau
106	196	Mittelmeerblau
136	186	Indischblau
135	194	Venezianisches Rot
115	195	Schottischer Lachs
132	192	Heidelbeerviolett
143	173	Arabisches Gold
140	170	Brasilianisches Braun
134	184	Japanische Glyzinie
103	182	Nevadagelb
123	193	Polynesiengrün
101	197	Karibikgrün
137	187	Leuchtendes Silber
121	199	Anthrazitgrau
130	180	Grafitsschwarz



Anthos **Classe A5** Continental

ENJOY THE DIFFERENCE



Flexible Installation.

Um Anpassungsarbeiten bei der Installation der Behandlungseinheit so gering wie möglich zu halten oder gänzlich zu vermeiden, sind zwei mögliche Bodenanschlüsse vorgesehen. Unter der Beinstütze oder unter dem vorderen Teil der Wassereinheit. Auf diese Weise wird beim Austausch eines alten Behandlungsstuhls mehr Flexibilität geboten.





Anthos
Classe A5
International

ENJOY THE DIFFERENCE





Anthos
Classe A5
Einzelne Wassereinheit

ENJOY THE DIFFERENCE



Anthos Classe **A5** Cart



Classe A5 Cart.

Die einzeln oder in Kombination mit dem Behandlungsstuhl erhältliche Classe A5 Cart bietet sich für medizinische Einrichtungen an, die sich eine hochflexible ergonomische Lösung wünschen. Wendigkeit, hohe Bewegungsfreiheit, Höhenverstellung des Instrumententrägers und skalierte Positionierung der Arbeitsinstrumente zählen zu den charakterisierenden Merkmalen dieser Version.

Anthos Classe **A5** Einzelner Cart



INSTRUMENTENTRÄGER

Natürliche Flexibilität

Continental.

Der kompakte und leichte Instrumententräger der Version Continental, der auf dem neuen Armsystem angeordnet und mit der optionalen Luftbremse kombiniert ist, ermöglicht eine Positionierung in jedem Behandlungsquadranten und garantiert somit höchste Arbeitsflexibilität. In zwei Größen verfügbares Traytablett: Standard und kompakt.



International.

Bei der Version International steht die Arbeitsergonomie im Vordergrund. Das moderne Design des Instrumententrägers profitiert von der ergonomischen Anordnung der Instrumente: Das Handstück ist von jedem Arbeitsbereich aus leicht greifbar. Die Arbeitseffizienz wird durch ein großzügiges Bedienfeld gewährleistet, dessen integrierte LCD-Farbkonsole Zugriff auf die Einstellungen der einzelnen Instrumente, des Behandlungsstuhls und der integrierten Zubehörgeräte bietet. Eine reichhaltige Auswahl an Optionen, darunter das sechste Instrument oder der Röntgensensor, das frontale Traytablett und der Röntgenbildbetrachter mit Hintergrundbeleuchtung mit großen Abmessungen, runden das Angebot der möglichen Ausstattungen ab.



Personalisierte Konfigurationen

HELPERINNENELEMENTE

Die natürliche Flexibilität von Classe A5 schafft auch auf der Helferinnenseite maximale Konfigurationsmöglichkeiten. Sowohl die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen als auch der Armtyp für das Helferinnenelement sind den Anforderungen des Behandlungsteams entsprechend konfigurierbar.

Das serienmäßig mit 3 Aufnahmen und optional mit höhenverstellbarem Doppelgelenkarm gelieferte Helferinnenelement ist für 2 Absaugkanülen und ein Handstück ausgelegt. Es kann zwischen Spritze, Kamera, Polymerisationslampe oder einem dynamischen Instrument gewählt werden.



Helferinnenelement mit 5 Instrumenten.

Das optionale Helferinnenelement ist mit 5 Aufnahmen ausgestattet. Es kann jede Position einnehmen, die zur Optimierung der Arbeitsergonomie von Nutzen ist. Neben den 2 Kanülen können bis zu 3 Handstücke nach Wahl, einschließlich Kamera, Spritze, Polymerisationslampe T-LED oder ein dynamisches Instrument hinzugenommen werden. Ein schwenkbares Traytablett aus Edelstahl vervollständigt das Zubehörangebot.



Helferinnenelement ORTHO.

In dem mit 4 oder 5 Aufnahmen erhältlichen Helferinnenelement können für die Version mit einzelner Wassereinheit neben den 2 Absaugkanülen auch bis zu 2 dynamische Instrumente in den Aufnahmen untergebracht werden, wobei der Zahnsteinentferner, der elektrische Induktionsmotor und die Turbine zur Wahl stehen. Ein praktisches glasgeschütztes Display, das die Desinfektion erleichtert, vervollständigt die Funktionalität und ermöglicht dem Zahnarzt die wichtigsten Einstellungen jedes einzelnen Instruments.



Die Wirkung des Lichts

LAMPEN

Für Classe A5 steht eine große Auswahl an OP-Lampen mit LED-Emission zur Verfügung. Serienmäßig ist die Behandlungseinheit mit der Venus Plus SCT, die auch in der in der Version Composite erhältlich ist, sowie mit zwei optionalen Lampen der MTC-Reihe ausgestattet.

Venus Plus SCT.

LED-Lampe mit 4 Lichtquellen mit hohem Farbwiedergabeindex (> 90) für eine naturgetreue Farbwahrnehmung. Die Helligkeit kann zwischen 3.000 und 50.000 Lux eingestellt werden und sorgt dank des großen Lichtspots für eine optimale Ausleuchtung der Mundhöhle ohne störende Schattenbildung. Abnehmbare Griffe für die Sterilisation und ausgestattet mit einem Infrarotsensor für das Einschalten/Ausschalten/Einstellen der Beleuchtungsstärke.





Venus Plus SCT Composite.

LED-Lampe mit 4 Lichtquellen, die sich außerhalb des Leuchtkörpers befinden und deren Beleuchtungsstärke von 3.000 bis 50.000 Lux einstellbar ist. Sie erzeugen einen großen Lichtspot und minimieren die Schattenbildung. Darüber hinaus sind zentrale 2 Lichtquellen vorhanden, die einen Lichtstrahl mit verschiedenen Wellenlängen erzeugen, die eine Vorpolymerisation der Komposite verhindern und gleichzeitig ein optimales Beleuchtungsniveau der Mundhöhle gewährleisten. Sie verfügt über einen hohen Farbwiedergabeindex (> 90), abnehmbare und sterilisierbare Griffe und ist darüber hinaus mit einem Infrarotsensor für das Einschalten/Ausschalten/Einstellen der Beleuchtungsstärke ausgestattet.



Die **Curing Mode**-Funktion verändert die Wellenlänge des Lichts, um einer Vorpolymerisation der Komposite vorzubeugen und zugleich eine optimale Beleuchtung sicherzustellen.

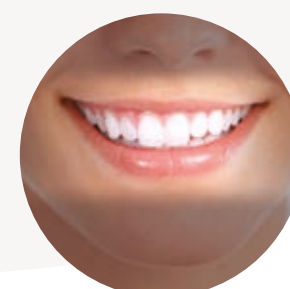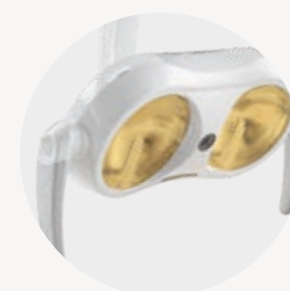

Venus LED MCT View.

Die Venus LED MCT View integriert eine 4K-Kamera mit PC-Software, um Bilder und Videos mit sehr hoher Auflösung aufzunehmen. Das auf Flüssiglinsen basierende Smart Focus-System garantiert eines schnelles und optimales digitales Fokussieren. Die Kamera verbessert nicht nur die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, sondern unterstützt auch die klinische Ausbildung, die Behandlungsdokumentation und den akademischen Wissensaustausch durch Aufzeichnungen und Multimedia-Streamings. Die Venus LED MCT View mit integrierter 4K-Kamera ist ein leistungsfähiges Mittel für die gemeinsame Nutzung und das bessere Verständnis klinischer Informationen, die der Arzt mit dem Patienten nutzen kann.



Venus LED MCT (Multi Colour Temperature).

Optionale Lampe der jüngsten Generation für die Nutzung von 3 verschiedenen Farbtemperaturwerten: 4300 K (Warmlicht) für chirurgische Behandlungen, 5000 K (neutrales Licht) für die konservierende Behandlung und 5500 K (Kaltlicht) für die Farbmessung.

HYGIENE

Sicherheit in der Praxis

Mit einer großen Auswahl an integrierten Hygienesystemen ist die Arbeitsumgebung sicher. Sicher für die Patienten, das Behandlungsteam und den Zahnarzt. Neben den automatischen Vorrichtungen, die der Verschmutzung der internen Leitungen vorbeugen, tragen auch die Gestaltungselemente wirksam zu

einer Reduzierung des Risikos einer gegenseitigen Ansteckung bei. Über die Bedienkonsole mit LCD-Farbdisplay hat der Bediener die vollständige Kontrolle über den erfolgreichen Abschluss der Desinfektionszyklen.



W.H.E. Nach DVGW zertifiziertes kontinuierliches Desinfektionssystem, das einer Verschmutzung des Versorgungswassers der Behandlungseinheit durch Rückfluss vorbeugt und gegen alle im Wasser vorkommenden Verunreinigungen wirkt. Empfohlen wird der Gebrauch von Peroxy Ag⁺.



BIOSTER und FLUSHING. BIOSTER ist das automatische System zur intensiven Desinfektion der inneren Kreisläufe der Sprays mittels antiseptischer Flüssigkeit (Peroxy Ag⁺). FLUSHING beseitigt die in den Leitungen stagnierende Flüssigkeit durch eine schnelle Spülung.



A.C.V.S. Automatisches Spül- und Desinfektionssystem der Absauganlage. Ermöglicht eine desinfizierende Behandlung zwischen einem Patienten und dem nächsten.



S.H.S. Vorrichtung für die Sprayversorgung als Alternative zum Wassernetz. Funktioniert mit einem mit destilliertem Wasser gefüllten Tank. Äußerst nützlich bei besonders hartem Leitungswasser.



O.D.R. Serienmäßig vorhandener Mechanismus, der automatisch einen Luftstrahl ausgibt, durch den flüssige und feste Rückstände nach dem Gebrauch vom Handstück entfernt werden.



Doppelte Filter. Sie sind leicht herausnehmbar und ermöglichen eine praktische Entleerung und Reinigung.



Griff. Der Handgriff des Instrumententrägers Continental ist abnehmbar und autoklavierbar.



Schutzfolien. Praktische Einweg-Schutzfolien für die Glasscheiben der Bedienkonsole.



Bezüge. Beständige, nahtlose und leicht zu desinfizierende Polsterungen.



Frontabdeckung abnehmbar. Die Instrumentenablage auf dem Instrumententräger Continental ist abnehmbar und desinfizierbar.



Absaugkanülenführungen. Leicht ausbaubare Elemente für eine perfekte Reinigung eines potenziell kritischen Bereichs.



Schnellkupplungen. Entriegelungssystem für die Reinigung und den eventuellen Austausch.

Echtzeit- diagnose

DIAGNOSE

Beschleunigt die Diagnose, optimiert den Arbeitsablauf und schafft die Grundlagen für eine effiziente Kommunikation mit dem Patienten. Vor allem dem in der Behandlungseinheit integrierten Multimediasystem mit LED-Monitor, Kamera und Röntgengeräten ist es zu verdanken, dass der Zahnarzt schnell mit der Diagnose fortfahren und den Behandlungsplan veranschaulichen kann.

Modernste Instrumente, Software für die Gerätesteuerung und Bildverwaltung und ein extrem einfaches drahtloses Handgerät für digitale Röntgenaufnahmen bilden ein integriertes System der gehobenen Klasse, das als Option erhältlich ist.

MULTIMEDIA

HD-Kamera C-U2.

Mit ihren hochauflösenden Bildern fördert sie die Kommunikation zwischen dem Zahnarzt und dem Patienten. Sie ist bedienungsfreundlich, erfordert keine manuellen Einstellungen und ihre flache Form trägt dazu bei, dass sich distale Flächen problemlos erreichen lassen.

22-Zoll-LED-Monitor.

Der integrierte 22-Zoll-Monitor ist für den Anschluss an den PC über Kabel vorbereitet. Er ist auch als Multitouch-Version erhältlich, mit Ausrichtungsmöglichkeit des Bildschirms durch 2 verschiedene Halterungstypen.

Anzeigen.

Von der Kamera aufgenommene Einzelbilder oder bis zu 4 als Mosaik angeordnete Bilder, die einen schnellen Vergleich

RADIOLOGIE

RXDC – HyperSphere-Technologie.

In der Behandlungseinheit integriertes intraorales Röntgengerät mit drahtlosem Handgerät. Ausgezeichnete Bilder durch die parallele Ausrichtung, die durch eine 30 cm-Kollimation in Verbindung mit einem Fokus von 0,4 mm erzielt wird. Der Röntgenkopf dreht um das Kugelgelenk, um unbegrenzte Positionen zu erreichen.

Zen-X.

Im Instrumententräger integrierter Röntgensensor, einsatzbereit mit USB-Kabel. Er ist in zwei Größen erhältlich und in der Lage, hochauflösende Bilder bei minimaler Strahlenbelastung aufzunehmen. Der desinfizierbare Sensor ist nach IP67 gegen das Eindringen von Wasser und Staub zertifiziert.

22-Zoll-LED-Monitor.

Full HD-Monitor im Format 16:9 mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und Flachbildschirm mit IPS Panel für eine einfache Ansicht aus jedem Winkel. Der Helligkeitsgrad und die Kontraststufe sind dank der LED-Quellen stets optimal.

Der Wert einer Entscheidung

Eine große Auswahl an Zubehörteilen ermöglicht es dem Zahnarzt, die Behandlungseinheit ganz den eigenen Bedürfnissen anzupassen.



Arbeitsstühle.

Ein reichhaltiges Sortiment an ergonomischen Lösungen. **S9** ist der sattelförmige Aktivsitz der jüngsten Generation mit Kippmechanismus. Begünstigt eine ausgewogene

Gewichtsverteilung und eine korrekte Körperhaltung, um die Wirbelsäule zu entlasten. **S7** für den Zahnarzt, höhenverstellbar und mit möglicher Anpassung der Rückenlehnenneigung. **S8** für die Helferin, mit rundem Sitz, um die häufigen

Positionswechsel, die während der Eingriffe gefragt sind, zu erleichtern. Jedes Modell trägt dazu bei, das Energieniveau und das Wohlbefinden über den ganzen Tag hinweg aufrechtzuerhalten.

Fußsteuerung.

Es stehen drei Ergonomien zur Verfügung, die alle ebenfalls in kabelloser Ausführung erhältlich sind. Sie ermöglichen die Chip-Air/Water-Aktivierung, die Umschaltung der Drehrichtung des Mikromotors, die Bewegung des Behandlungsstuhls und das Aufrufen der abgespeicherten Positionen.



Kopfstütze.

Neben der in zwei Achsen verstellbaren Version mit mechanischer Verriegelung ist das Modell Comfort auch mit pneumatischem Verriegelungssystem und Bewegung in drei Achsen für eine freie und präzise Positionierung erhältlich.



Stop Vacuum.

In der Basis des Behandlungsstuhls integrierte Vorrichtung, die bei Betätigung die Unterbrechung der Absaugung bewirkt, ohne die Kanülen ablegen zu müssen.



Speischalengruppe.

Vollständig ausbaubar für eine schnelle und effiziente Desinfektion und bestehend aus Elementen, die sich durch leicht zu reinigende und zu desinfizierende Elemente, serienmäßig aus Keramik oder aus Glas als Option, auszeichnen.

Anthos Connect

Das gesamte Sortiment der Behandlungseinheiten Anthos ist mit einem integrierten Gerät für die Internetverbindung ausgestattet. Auf diese Weise kann die Praxis in Echtzeit von einem Diagnoseservice und technischer Unterstützung profitieren. Dank Di.VA*, dem digitalen virtuellen Assistenten, ist es dem Zahnarzt anhand eines einfachen Dashboards möglich, die Nutzung der Behandlungseinheit, der Instrumente und der ausgeführten Desinfektionszyklen zu

überwachen. Durch einfaches Öffnen eines beliebigen Browsers kann auf das Portal der digitalen virtuellen Assistenzdienste zugegriffen werden. Diese immer dem neuesten Stand entsprechenden Dienste stehen in der Cloud zur Verfügung, sind dem erworbenen Modell vorbehalten und funktionieren, ohne irgendwelche Softwares herunterladen zu müssen.

*Digital Virtual Assistant



Allgemeine Nutzung.

Die Nutzung der einzelnen Behandlungseinheiten oder des installierten Gerätebestands wird überwacht. Somit kann der Praxisinhaber oder die Zahnklinik den tatsächlichen Einsatz der Behandlungseinheiten feststellen, der über den optionalen, die Anwesenheit des Patienten erkennenden Sensor oder basierend auf der Einschaltung der OP-Lampe quantifiziert wird.

Tutorials und Benutzerhandbücher.

Dank Di.V.A. hat der Benutzer Zugriff auf Tutorials, die sich auf das erworbene Modell beziehen. So kann ihm beispielsweise in einem Video gezeigt werden, wie die Speischale abzumontieren oder die Behälter für die Desinfektion aufzufüllen sind. Darüber hinaus kann direkt auf die ständig aktualisierte und online bereitgestellte Benutzer- und Wartungsanleitung zugegriffen werden.



Desinfektionszyklen.

Di.V.A. verfolgt die Nutzungshäufigkeit der Hygienesysteme und zeichnet jede Inbetriebnahme auf, um eine Historie der ausgeführten Desinfektionszyklen zu erstellen. Dies ist für praxisinterne Kontrollen von Nutzen und auch im Zusammenhang mit Verbrauchsschätzungen und einer Überwachung der effektiven Gerätewiederherstellung dienlich.

Nutzung der Instrumente.

Über das Dashboard kann die tatsächliche Nutzung der integrierten Instrumente überwacht werden und zudem die Verwendung (konservierende Zahnbehandlung, Endo) jedes einzelnen Instruments in Erfahrung gebracht wird. Dies ist bei der Einschätzung des Wartungsbedarfs oder der Bewertung möglicher Aufrüstungen an bestimmten Geräten hilfreich.