



anthos.com



BU MEDICAL EQUIPMENT
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
HEADQUARTERS Cefla s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

STABILIMENTO
PLANT

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601



Making Your Life Better.



07/2025 ACL3SP2151S00
Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.
Según las normativas vigentes, en las áreas fuera de la UE algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



A3

ES
Anthos
Classe
A3Plus

CONTINENTAL
INTERNATIONAL

im
prove

im prove

improve potential.

Clase A3 Plus: el mundo Anthos aumenta tu potencial garantizando la fiabilidad, flexibilidad y funcionalidad necesarias para responder a todas tus necesidades clínicas.

improve quality.

Alta calidad constructiva, tecnología de vanguardia, excelente ergonomía de trabajo y comodidad del paciente. Clase A3 Plus: una inversión equilibrada con ventajas que superan los estándares habituales.

improve performance.

Clase A3 Plus ofrece una vasta gama de prestaciones operativas especializadas que elevan el umbral de las características profesionales del equipo. La personalización de las funciones permite maximizar los resultados.



**Anthos
Classe A3
Plus.**

DISPLAY DIGIT

Simple gestos intuitivos

El layout de la consola Digit, provisto de negatoscopio, es fácil de leer e incluye numerosas funciones. El acceso a las programaciones de los distintos instrumentos, del sillón y de los sistemas integrados es rápido e intuitivo

y el proceso se visualiza en el display alfanumérico. Su diseño maximiza la ergonomía de uso del operador facilitando su trabajo.

Pantalla táctil.

La superficie de la consola está protegida con un cristal capacitivo y se puede desinfectar fácilmente.



Control de las prestaciones.

Con la nueva consola es posible gestionar los modos de uso y los parámetros de todos los instrumentos y adecuarlos a las necesidades del operador.

Ligero, compacto y dotado opcionalmente de una potente fuente de iluminación LED, el micromotor i-MMr puede regularse a una velocidad comprendida entre 100 y 40 000 rpm.

Disponible también en versión con iluminación LED integrada y compatible con las mejores puntas del comercio, el ultrasonidos es regulado a la potencia máxima ofreciendo al operador la posibilidad de equilibrar la rapidez de la limpieza dental y el confort del paciente.

El display alfanumérico muestra toda la información relativa a las programaciones de los instrumentos, así como la información relativa al estado de los ciclos de desinfección activados.

El control de las distintas actividades es simple e inmediato.

La función Clean inhibe el funcionamiento de la consola durante la limpieza de la superficie de vidrio, evitando la activación involuntaria de los mandos.

Máxima adaptabilidad

International.


Diseño moderno y disposición inteligente de los instrumentos para mejorar la ergonomía de uso: las piezas de mano pueden empuñarse cómodamente desde cualquier posición operativa.



BANDEJA DOCTOR



Una amplia gama de opciones, como sexto instrumento, sensor radiográfico, tray transtorácico y negatoscopio retroiluminado de grandes dimensiones, completa el surtido del equipamiento disponible.

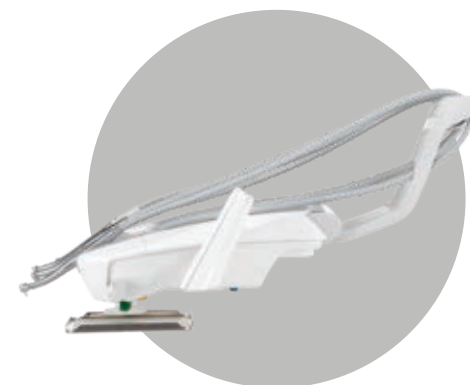


Continental.

El sistema de brazos y la bandeja doctor han sido rediseñados para permitir que el operador adopte cualquier posición operativa. Clase A3 Plus responde ergonómicamente a cualquier necesidad clínica.



Las nuevas varillas de los instrumentos, de altura reducida, disminuyen la interferencia con la lámpara y aseguran un mayor alargamiento del instrumento. Bandeja portatray disponible en dos tamaños: estándar y compacto.

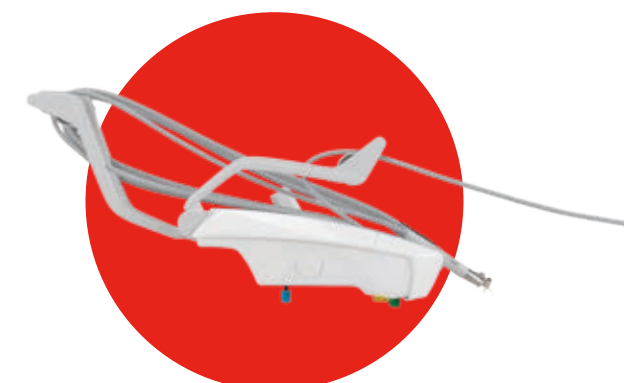

ENERGÍA

Potencial expresado

Las bandejas doctor, en las versiones Continental e International, ofrecen ergonomía y facilidad de uso al profesional. Instrumentos específicos para cada necesidad, de los micromotores ligeros y ergonómicos a la cámara HD con cabezal fino y tecla capacitiva para facilitar

la función de congelación de imagen. Mediante la consola, el operador gestiona el modo de uso y los parámetros de todos los instrumentos adecuándolos a sus necesidades clínicas. La aplicación opcional del sexto instrumento permite añadir una cámara o una lámpara polimerizadora.



Micromotor FLUO.

La luz LED UV que resalta el material compuesto está disponible como elemento opcional en el micromotor LED.



Micromotores.

El modelo suministrado de serie i-MMr (3,3 Ncm) está disponible también con iluminación LED opcional. Su velocidad está comprendida entre 100 y 40 000 rpm.



Ultrasonidos.

Con o sin LED, piezas de mano compatibles con las mejores puntas del mercado.



Turbinas y contra-ángulos.

El profesional dispone de una amplia gama de turbinas y contra-ángulos específicos para cada prestación odontológica.



Jeringas.

Las jeringas con 3 funciones se caracterizan por su forma ergonómica. El cuerpo metálico de la jeringa y la boquilla, disponible en versión recta o con ángulo, pueden desmontarse y esterilizarse en autoclave.



T-LED.

T-LED tiene un espectro de emisión para la activación de los compuestos de última generación, empuñadura giratoria, interfaz intuitiva y programa bracket entre los 7 disponibles, con 5 emisiones de breve duración.



Cámara HD.

C-U2 posee una óptica de vidrio y difusor LED e incorpora un sensor HD 16:9 capaz de capturar imágenes clínicas de alta definición.



Anthos **Classe A3 Plus** Continental

ENJOY THE DIFFERENCE




Instalación flexible. Con el fin de minimizar o evitar las obras de adaptación durante la instalación del equipo, existen dos posibles conexiones para las fuentes de alimentación de suelo. Debajo del reposapiernas o debajo de la parte delantera del grupo hídrico. De esta forma existe una mayor flexibilidad cuando se efectúa la sustitución de un viejo sillón.





Anthos
Classe A3Plus
International

ENJOY THE DIFFERENCE

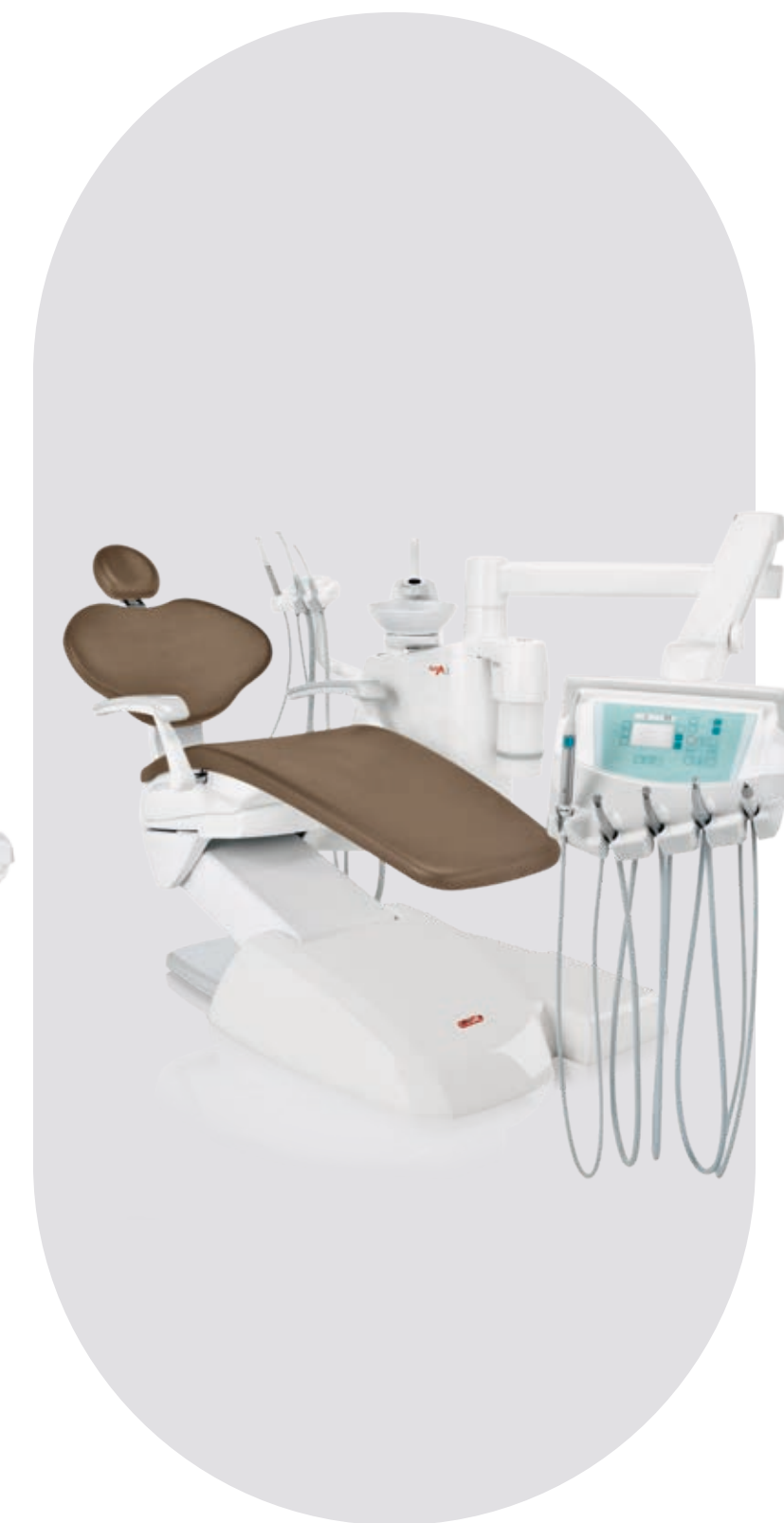

Armonía del movimiento

EQUILIBRIO

La ergonomía operativa y el confort del paciente son el resultado natural del proyecto y el diseño del sillón. Altamente resistentes, las tapicerías están desprovistas de costuras y se encuentran disponibles en 19 colores

distintos. Los acolchados Memory Foam opcionales ofrecen una experiencia exclusiva al paciente en términos de comodidad y bienestar.

Ergonomía ISO-JOINT. Gracias a la nueva geometría ISO-JOINT, el movimiento compensado respaldo-asiento maximiza el confort y minimiza el deslizamiento de la cabeza del paciente.



Sensor de presencia paciente.
El sillón puede estar dotado de un sensor opcional para detectar la presencia del paciente que, conectado con la función stand-by, permite reducir sus consumos energéticos cuando no se encuentra ocupado.



Movilidad y capacidad.
Su elevada movilidad vertical, 37-80 cm, favorece el confort operativo asegurando un fácil acceso incluso a los pacientes ancianos. El sillón está homologado para elevar a pacientes de hasta 190 kg.



Respaldos.
La posibilidad de elegir entre dos tipos de respaldo, con perfil estrecho o perfil ancho, responde a las múltiples exigencias ergonómicas del odontólogo. El acceso es siempre cómodo y el confort del paciente queda garantizado en todo momento.




Acolchados estándar

102 113 106 136 135 115 132 141 142 140



198 183 196 186 194 195 192 171 172 170

Acolchados Memory Foam

COLORES



102 198 azul atlántico
113 183 azul pacífico
106 196 azul mediterráneo
136 186 azul índico
135 194 rojo veneciano
115 195 salmón escocés
132 192 violeta arándano
141 171 beige papiro
142 172 avellana de anatolia
140 170 marrón brasileño
143 173 oro árabe
144 174 rojo rubí
134 184 glicina japonesa
103 182 amarillo nevada
123 193 verde polinesia
101 197 verde caribe
137 187 plateado brillante
121 199 gris antracita
130 180 negro grafito

BANDEJAS AUXILIAR

Soluciones completas

Máxima operatividad del lado auxiliar. El número de alojamientos disponibles y el tipo de brazo de la bandeja pueden ser configurados según las necesidades del equipo médico.



Suministrada de serie, la bandeja de 3 alojamientos está predispuesta para contener 2 cánulas y una pieza de mano. Es posible elegir entre la jeringa, la cámara y la lámpara polimerizadora. Opcionalmente, se puede montar el brazo de doble articulación y la bandeja de 5 alojamientos. En este caso, a las 2 cánulas se suman hasta 3 piezas de mano a elegir: cámara, jeringa, lámpara polimerizadora T-LED. Una bandeja portatray orientable de acero inoxidable completa la oferta de los accesorios.



LÁMPARAS

Efecto luz

La amplia selección de lámparas escialíticas disponibles en Clase A3 Plus permite al médico elegir entre la fuente de emisión LED y halógena.

Venus E LED.

Suministrada de serie, Venus E LED está dotada de sensor de encendido «no touch» y posee una intensidad luminosa modulable entre 7000 y 40 000 lux y seis fuentes LED de iluminación para minimizar las sombras en el campo operatorio.


Venus Plus SCT.

Lámpara LED dotada de 4 fuentes luminosas con un elevado índice de reproducción cromática (>90) para ofrecer una percepción fiel y natural de los colores. La luminosidad puede regularse entre 3000 y 50 000 lux y, gracias a su amplio spot, optimiza la iluminación de la cavidad bucal sin generar sombras molestas. Agarraderas desmontables para la esterilización y dotada de sensor de infrarrojos para el encendido/el apagado/la regulación de la intensidad.


Venus Plus SCT Composite.

Lámpara LED dotada de 4 fuentes luminosas situadas en el exterior del elemento de iluminación y con intensidad regulable de 3000 a 50 000 lux, que crean un amplio spot minimizando la generación de sombras. También hay presentes 2 fuentes centrales que generan un haz luminoso con diferentes longitudes de onda, que previenen la prepolimerización de los compuestos garantizando al mismo tiempo un excelente nivel de iluminación de la cavidad bucal.



HIGIENE

Ambiente protegido

Ambiente clínico seguro para los pacientes, para el equipo operativo y para el profesional, gracias a una amplia gama de sistemas de higiene integrados opcionales. Dispositivos automáticos que previenen la contaminación de los conductos internos y elementos

de diseño proyectados para minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Consola con display alfanumérico para controlar totalmente la evolución de los ciclos de higienización.



W.H.E.

Sistema certificado DVGW de desinfección continua que previene la contaminación por reflujo del agua de alimentación del equipo y actúa contra todos los contaminantes acuáticos. Se aconseja el uso de Peroxy Ag+.



BIOSTER y FLUSHING.

BIOSTER es un sistema automático de desinfección intensiva de los circuitos internos de los sprays mediante un líquido antiséptico (Peroxy Ag+). FLUSHING elimina el líquido estancado en los conductos a través de un rápido aclarado.



S.H.S.

Dispositivo de alimentación de los sprays alternativo al agua de la red. Funciona por medio de un depósito cargado con agua destilada. Muy útil cuando la dureza del agua de la red es elevada.



O.D.R.

Mecanismo presente de serie, que emite automáticamente un flujo de aire para alejar los posibles residuos líquidos y sólidos de la pieza de mano después del uso.



Filtro.

Amplio filtro de doble cámara para garantizar una mayor eficiencia del sistema de aspiración.



Apoya-instrumentos de silicona.

Fácil de desmontar y esterilizable en autoclave.



Agarradera bandeja doctor.

La agarradera de la bandeja doctor Continental es extraíble y esterilizable en autoclave.



Película de protección.

Prácticas protecciones desechables, que cubren los vidrios de las consolas.



Guías de las cánulas.

Elementos fácilmente desmontables para asegurar la perfecta limpieza de una zona potencialmente crítica.



Agarraderas lámpara.

Desmontables y esterilizables en autoclave.



Frontal extraíble. En la bandeja Continental, el soporte de los instrumentos es desmontable y desinfectable.



Tapicerías. Acolchados resistentes, libres de costuras y fáciles de higienizar.

Comunicación y diagnóstico

La eficacia de la comunicación con el paciente se basa en la posibilidad de compartir fácilmente el diagnóstico. Gracias al sistema multimedia integrado, con monitor LED y cámara montados en el equipo, el médico es capaz de ilustrar

eficazmente el plan terapéutico mostrando las imágenes, las radiografías y las fotografías que constituyen la base del diagnóstico.

C-U2 cámara HD.

Con sus imágenes de alta resolución, favorece la comunicación médico-paciente. Fácil de usar y sin regulaciones manuales, sus formas finas ayudan a alcanzar fácilmente las zonas distales.

Monitor LED 22".

Monitor Full HD 16: 9, resolución 1920 x 1080 píxeles y pantalla plana con panel IPS para facilitar la visualización desde cualquier perspectiva. Gracias a las fuentes LED, el grado de brillo y el nivel de contraste son ideales.

Visualizaciones.

El monitor permite visualizar imágenes capturadas por la cámara de modo individual o grupos de hasta 4 imágenes dispuestas en mosaico para efectuar rápidas comparaciones.

Zen-X.

Sensor radiográfico integrado en la bandeja doctor, listo para el uso con cable USB. Capaz de adquirir imágenes de elevada resolución con dosis mínimas de radiación, está disponible en dos medidas. Higienizable, el sensor cuenta con la certificación IP67 contra la penetración del agua y del polvo.



El valor de una elección

Gracias a la amplia gama de accesorios disponible, el odontólogo puede personalizar la unidad operativa según sus propias exigencias.



Asientos. Una gama rica en soluciones ergonómicas.
S9 es un asiento activo de última generación con forma de sillín, con mecanismo basculante. Favorece una distribución equilibrada del peso y una postura correcta que reduce el esfuerzo en la columna vertebral.
S7 para el médico, regulable en altura y con posibilidad de ajustar la inclinación del respaldo.
S8 para el auxiliar, con asiento de forma circular para facilitar los frecuentes cambios de posición que son necesarios durante las intervenciones. Todos los modelos contribuyen a mantener un alto nivel de energía y una sensación de bienestar a lo largo del día.

Mando de pie.

Cuatro pedales disponibles, que permiten activar las funciones Chip Air/Water, invertir el sentido de rotación del micromotor, desplazar el sillón (opcional) y volver a utilizar las posiciones memorizadas.



Reposacabezas. En versión regulable sobre dos ejes y con bloqueo mecánico o en versión Comfort con sistema de bloqueo neumático y movimiento sobre tres ejes, que garantiza un posicionamiento libre y exacto.



Stop Vacuum. Dispositivo integrado en la base del sillón que, mediante presión, permite interrumpir la aspiración sin necesidad de depositar las cánulas.



Portatray giratorio. Es posible sustituir la escupidera por un portatray giratorio colocado en la cubierta del grupo hídrico.



Grupo escupidera. En material melamínico, u opcionalmente en cerámica, puede desmontarse por completo para asegurar una higienización eficaz y está compuesto por elementos contruidos con materiales fáciles de limpiar y desinfectar.



Anthos Connect

Toda la gama de los equipos Anthos está equipada con un dispositivo integrado que permite conectarse a Internet. De este modo el consultorio puede acceder a un servicio de diagnóstico y soporte técnico en tiempo real. Además, gracias al asistente virtual digital Di.V.A.* el profesional es capaz de monitorizar el uso del equipo, de los instrumentos

y de los ciclos de desinfección ejecutados mediante un simple panel. Para acceder al portal de servicios de asistencia virtual digital, es suficiente abrir un navegador. Los servicios disponibles en la nube para cada modelo son actualizados constantemente y funcionan sin necesidad de descargar ningún software.

*Digital Virtual Assistant



Uso general.

Se monitoriza el uso de cada equipo o del parque de máquinas instalado. De esta forma el propietario del consultorio o de la cadena de clínicas odontológicas puede conocer el uso efectivo de los equipos, cuantificado mediante un sensor opcional que detecta la presencia del paciente o basándose en el encendido de la lámpara escalfítica.



Ciclos de desinfección.

Di.V.A. traza la frecuencia de uso de los sistemas de higiene registrando cada arranque para conservar un historial de los ciclos de desinfección ejecutados. Útil en caso de control en el consultorio, también sirve para estimar los consumos y monitorizar el efectivo restablecimiento de los aparatos.

Uso de los instrumentos.

A través del panel se puede monitorizar el uso efectivo de los instrumentos integrados. Esto ayuda a estimar las necesidades de mantenimiento o a evaluar las posibles intervenciones de actualización en algunas máquinas.



Tutoriales y manuales de uso.

Gracias a Di.V.A., el usuario puede acceder a los tutoriales del modelo adquirido. De este modo puede ver un vídeo que muestra cómo se desmonta la escupidera o cómo se rellenan los depósitos para la desinfección, por ejemplo. Además, puede acceder directamente al manual de uso y de mantenimiento online, constantemente actualizado.