




anthos.com

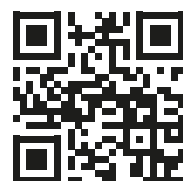

BU MEDICAL EQUIPMENT
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
HEADQUARTERS Cefla s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

STABILIMENTO
PLANT

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601



Making Your Life Better.



07/2025 ACL6FR251S00
Objet d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones hors UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et des spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur local.



A6



FR

Anthos
Classe A6 Plus

CONTINENTAL
INTERNATIONAL

ex
plore

ex plore

explore comfort.

Un projet qui garantit le confort pour le professionnel, l'équipe du cabinet et les patients. Il associe efficacité et praticité d'utilisation pour offrir au praticien une journée sans stress physique.

explore potential.

Fonctions et technologies qui permettent au praticien de traiter en toute sérénité diverses disciplines cliniques, aidé de logiciels, d'instruments et de systèmes évolués et totalement intégrés.

explore safety.

Un concept destiné à minimiser tous les risques de contamination croisée. Systèmes d'hygiène automatiques et certifiés. Protection active pour les patients et les opérateurs.




**Anthos
Classe A6
Plus.**

Confort opérationnel dans le design

LÉGÈRETÉ

Forme compacte, style léger, une tablette Continental qui prend peu de place et permet une flexibilité des mouvements. Conçue avec des leviers de rappel qui ne

gênent pas l'éclairage et garantissent un allongement notable. La force de traction et l'équilibrage de chaque levier de rappel sont réglables individuellement.

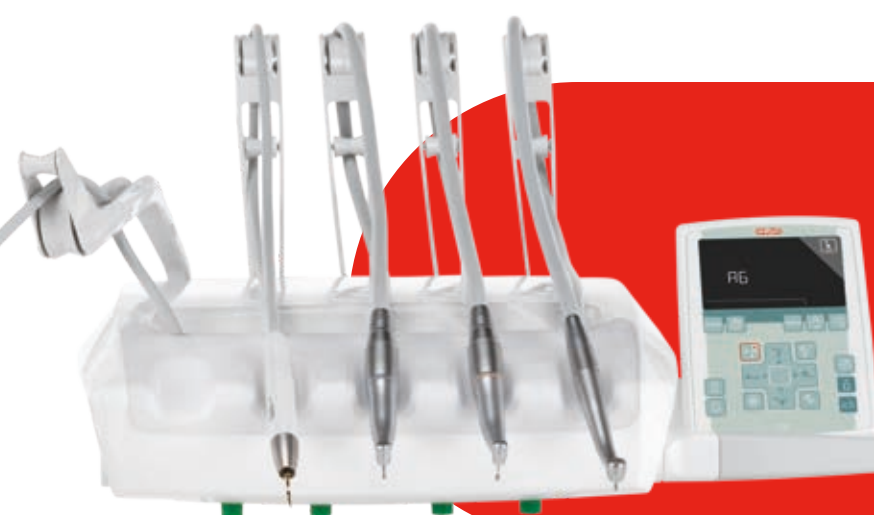

Technologie SideFlex.

Dotés de la technologie SideFlex en option, les leviers de rappel suivent de manière ergonomique le mouvement latéral du cordon. L'articulation réduit la fatigue et la traction sur le poignet de l'opérateur, et la récupération optimale de l'instrument est garantie quelle que soit la position de travail.



Confort de travail.

Débloccage pneumatique activé par le capteur sur la poignée pour régler la hauteur des instruments. Sixième instrument en option, et tablette porte plateau, disponible en deux tailles : standard et compacte.



Géométries sûres et fonctionnelles

SOUPLESSE

Le design de la tablette International, associé au niveau de souplesse offert par le système de bras, permet au praticien de se positionner et de travailler dans tous les champs opératoires. Disposés de manière ergonomique, les instruments sont stables dans leurs logements et il est

facile de saisir la pièce à main dans toutes les positions. Les géométries de la tablette International sont dans une organisation optimale dans l'espace opératoire, les instruments étant accessibles et l'écran au premier plan.



Logement supplémentaire.

À titre d'accessoire, le logement pour le sixième instrument et la préparation pour le capteur radiographique Zen-X sont disponibles.



Négatoscope.

Rétroéclairé, de dimensions permettant de visualiser de grands clichés et des panoramiques, il est positionné afin d'offrir à l'opérateur une vision pratique et directe.



Tablette porte plateau.

Disponible dans la version transthoracique, de grandes dimensions, elle offre une vaste surface d'appui facilement accessible pour le praticien et l'assistante.



La richesse côté assistante

PERSONNALISATION

Capacité maximale de configuration du côté assistante, où il est possible de trouver des tablettes à 3 ou à 5 logements. Montée sur double bras réglable en hauteur, la tablette représente une aide importante grâce à l'écran tactile avec verre intégré, qui gère les mouvements du

fauteuil et une série de fonctions importantes telles que l'activation des systèmes d'hygiène quand ils sont présents, l'eau dans le gobelet, l'allumage et l'extinction de l'éclairage, le rinçage et la mise en veille.



Crachoir avec capteur optique.

Le système de distribution d'eau peut être équipé d'un capteur automatique pour le remplissage du gobelet en option. Le crachoir en céramique est entièrement démontable pour permettre une désinfection rapide et efficace. En option, il peut être motorisé. Dans ce cas, le logiciel synchronisera les opérations de rinçage et les mouvements du fauteuil.



Tablette assistante à 5 instruments.

La tablette en option dispose de 5 logements. Elle peut assumer toutes les positions utiles pour optimiser l'ergonomie de travail. Les 2 canules sont flanquées de 3 pièces à main au choix, comprenant une caméra, une seringue, une lampe à polymériser T-LED ou un instrument dynamique.



Tablette assistante à 3 instruments.

Fournie de série, la tablette à 3 instruments est la réponse à tous les besoins cliniques grâce aux multiples positions qu'elle peut assumer. Une tablette porte plateau orientable en acier inoxydable complète la gamme d'accessoires.





ENJOY THE DIFFERENCE

Anthos **Classe A6 Plus** Continental





ENJOY THE DIFFERENCE

Anthos **Classe A6 Plus** International



STYLE

Exclusivité et design

D'une part la conception compacte du groupe hydrique et le choix chromatique étendu, qui donnera une touche de style à votre cabinet. D'autre part, la fonctionnalité des éléments et la qualité des matériaux. Une bouteille d'alimentation indépendante accessible de l'extérieur, un grand couvercle qui offre un accès facile aux systèmes à l'intérieur du groupe hydrique et un crachoir qui reste en dehors de la zone de travail en position de repos.



Personnalité unique.
Le groupe hydrique est disponible en 4 coloris en option et qui peuvent être assortis aux selleries standard ou aux rembourrages Memory Foam, tous les deux disponibles en 19 couleurs.

Rembourrages Memory Foam.
Les rembourrage Memory Foam en option offrent au patient une expérience exclusive en termes de confort et de bien-être.



COULEURS

- 141 171 beige papyrus
- 142 172 noisette d'Anatolie
- 143 173 or arabique
- 140 170 marron brésilien
- 144 174 rouge rubis
- 102 198 bleu atlantique
- 113 183 bleu pacifique
- 106 196 bleu méditerranéen
- 136 186 bleu indien
- 135 194 rouge vénitien
- 115 195 saumon écossais
- 132 192 violet myrtille
- 134 184 glycine japonaise
- 103 182 jaune névada
- 123 193 vert polynésien
- 101 197 vert caraïbe
- 137 187 argent brillant
- 121 199 gris anthracite
- 130 180 noir graphite

Selleries standard



Rembourrages Memory Foam

Les formes du confort

Le design du fauteuil garantit au professionnel une ergonomie opératoire optimale et au patient un confort maximal. Le profil fin de l'assise évite d'obstruer les espaces en dessous du fauteuil.

Fauteuil façonné.

La silhouette rétrécie et les dimensions réduites sont étudiées pour permettre à l'ensemble de l'équipe médicale d'opérer de manière fluide et sans obstacles. Les lignes épurées et essentielles garantissent une grande simplicité de désinfection.



SILHOUETTES

Dossiers.

Le choix entre trois types de dossier, silhouette étroite, silhouette large et dossier Nordic, est la réponse aux nombreuses exigences ergonomiques du chirurgien-dentiste. Le confort du patient est toujours garanti et l'accès est toujours facile.

FORMES




L'importance des mouvements

SYNCHRONISME



Capteur de présence du patient.

Il est possible d'équiper le fauteuil d'un capteur en option qui détecte la présence du patient et, connecté à la fonction de veille, permet de réduire les consommations d'énergie quand le fauteuil n'est effectivement pas occupé.

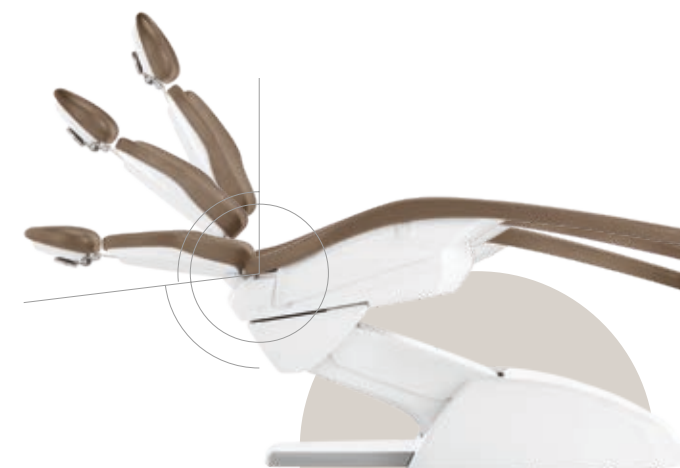

Le confort en mouvement.

Mince mais toutefois solide, le fauteuil possède un moteur homologué capable de soulever des patients jusqu'à 190 kg. Grâce à la nouvelle géométrie ISO-JOINT, le mouvement compensé dossier-assise maximise le confort et minimise le glissement de la tête du patient.



Course verticale.

La grande course verticale, de 37 à 80 cm, favorise le confort opératoire et permet un accès facile même pour les patients âgés.



Installation flexible.

Pour minimiser ou éviter tous travaux d'adaptation durant l'installation de l'unité de soins, deux branchements aux raccordements au sol ont été prévus. Sous le repose-jambes ou sous la partie avant du groupe hydrique. Cela offre davantage de flexibilité quand on remplace un vieux fauteuil.

ANATOMIE

Tête.

En plus de la version réglable sur deux axes et avec blocage mécanique, la tête Comfort est disponible en option, qui respecte totalement l'anatomie du patient. Le mouvement orbital, sur les 3 axes, permet d'obtenir le positionnement parfait de la tête, en garantissant le confort du patient même lors de séances prolongées.



Accoudoirs.

Les accoudoirs avec des inserts assortis aux selleries se caractérisent par leur confort et pivotent tous les deux.




Fonctions avancées, précision assurée

L'unité de soins Classe A6 Plus est dotée de la nouvelle console avec écran LCD tactile couleurs. L'iconographie en couleurs facilite la compréhension des diverses fonctions et l'activation des commandes est immédiate.

ÉCRAN LCD TACTILE


L'écran présente la visualisation claire des principales informations. L'accès aux paramètres de chacun des instruments, du fauteuil et des dispositifs intégrés est rapide et convivial.

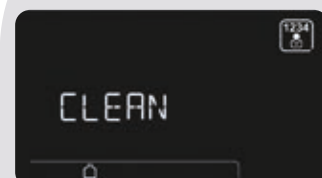

Clean.

Fonction qui inhibe le fonctionnement du clavier pendant le nettoyage de la surface en verre de la console, évitant l'activation involontaire des commandes.

CLEAN

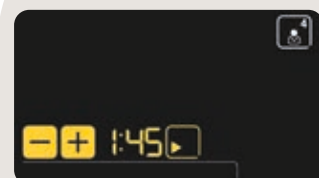

Chronomètre.

Grâce à cette fonction, les opérations qui nécessitent une vérification du temps d'application, comme l'utilisation de gel mordant ou de composites, sont facilement contrôlées.



Endo.

Grâce au micromoteur i-MMs, disponible en option, le praticien accède à toutes les fonctionnalités endodontiques gérées de manière intégrée par la console de commande en dotation sur l'unité de soins.

ENDO



Multi-utilisateurs.

Flexibilité maximale d'utilisation avec mémorisation des automatismes du système gobelet-crachoir, positions de travail préférées et paramètres d'utilisation de chaque instrument, jusqu'à un maximum de 4 opérateurs différents. Fonction utile pour les cabinets de plusieurs professionnels ou pour les cliniques avec une rotation importante de spécialistes.



INSTRUMENTS

Des performances élevées

Intégrés dans l'électronique de l'unité de soins, possibilité de gérer de manière pratique la modalité d'utilisation de chacun des instruments directement depuis la console, les instruments à disposition sur la Classe A6 Plus permettent au praticien de pratiquer un grand nombre

d'activités cliniques. Les paramètres d'utilisation sont personnalisables en fonction de la discipline et du profil du praticien, qui rappelle ses préférences par l'intermédiaire de l'écran LCD.



Instruments adaptés à chaque besoin, des micromoteurs légers et ergonomiques à la caméra HD avec une tête fine et une touche tactile pour faciliter la fonction d'arrêt sur image. Une sélection de pièces à main évoluées pour permettre au praticien d'explorer tous les environnements de son métier.



Micromoteurs FLUO.

Disponible en option sur les deux micromoteurs, la lumière LED fluorescente qui met en évidence le matériau composite.



Micromoteurs.

Deux versions : i-MMr (3,3 Ncm) avec LED ; i-MMs (5,3 Ncm) avec éclairage LED, prédisposition pour des traitements endodontiques. De 100 à 40 000 tours/min.



Détartreurs.

Avec ou sans LED, des pièces à main compatibles avec les meilleures pointes du marché. En mode ENDO, ils constituent un instrument valable dans les traitements canaux.



Turbines et contre-angles.

Un large éventail de turbines et de contre-angles, spécifiques à chaque prestation dentaire, est à la disposition du professionnel.



Seringues.

Disponibles en 3 et 6 fonctions, elles se caractérisent par une forme ergonomique. Le corps en métal de la seringue et le bec, disponible en version droite et coudée, peuvent être démontés et désinfectés en autoclave.



T-LED.

T-LED dispose d'un spectre d'émission permettant l'activation des composites même de dernière génération, d'une poignée rotative, d'une interface conviviale ainsi que du programme « bagues », parmi les 7 disponibles, avec 5 courtes émissions.



Caméra HD.

La caméra C-U2 possède une optique en verre et un diffuseur LED, elle intègre un capteur HD 16 : 9 pouvant prendre des images cliniques en haute définition.


ENDODONTIE

Potentiel clinique majeur

Le système en option d'endodontie intégrée optimise l'ergonomie des traitements canaux. Il est composé d'un micromoteur, de fonctions Autostop, Autoreverse et Autoforward, ainsi que d'un localisateur d'apex électronique. Pendant le traitement, les données

essentielles sont affichées pour permettre un contrôle complet de l'opération.

Le logiciel programme automatiquement les valeurs de couple et de vitesse ; ces mêmes valeurs peuvent être aussi définies librement par le praticien.

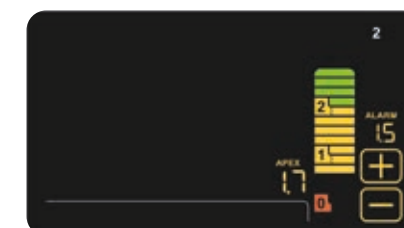

Endodontie. Pendant le traitement endodontique, la console LCD couleur visualise les données fondamentales, utiles pour que le chirurgien-dentiste ait un contrôle complet de l'opération.

Localisateur d'apex. Lors de l'instrumentation du canal radiculaire, la distance par rapport à l'apex est affichée sur l'écran LCD. La distance par rapport à l'apex est vérifiée par le logiciel ENDO. Lorsque l'apex est atteint, la rotation du micromoteur est interrompue par la fonction Apex-Stop.



Micromoteur i-MMs.

Léger, compact et totalement autoclavable. Réglage fin et précis du couple.



Contre-angle.

Avec un rapport de réduction de 4 : 1, EVO E4 est autoclavable et thermo-désinfectable. La tête miniaturisée facilite l'accès aux zones de soins les plus difficiles à atteindre.



Micromoteurs FLUO.

Outre les améliorations apportées pour réduire le poids et le bruit des micromoteurs Anthos, ceux-ci sont aujourd'hui disponibles avec la technologie FIT (Fluorescence-aided Identification Technique) pour identifier la présence de matériaux composites dans les dents.



Facilement visible.

Le matériau composite présent dans la dent est révélé par la lumière LED UV. L'intervention pour l'enlever est donc plus facile, rapide et précise par rapport à celle effectuée en utilisant un éclairage à LED blanche classique.

Optimisation du flux de travail

Le système multimédia d'acquisition d'images HD et de radiologie intégrée contribue à la réduction du temps passé dans le fauteuil. Le patient bénéficie aussi d'une participation efficace qui lui permet d'être informé sur le traitement thérapeutique proposé.

L'accélération du diagnostic et la communication efficace avec le patient garantissent un flux de travail plus rapide qui favorise la rentabilité totale du cabinet.

INTÉGRATION

MULTIMÉDIA

Caméra HD C-U2.

Avec ses images haute résolution, elle favorise la communication entre le patient et son praticien. Facile à utiliser et sans réglages manuels, ses formes minces aident à atteindre facilement les zones distales.

Moniteur LED 22".

Le moniteur 22" intégré peut être connecté via câble au PC. Il est également disponible en version multipoint avec écran orientable via 2 types différents de support.

Visualisations.

Il est possible de visualiser sur l'écran les images individuelles enregistrées par la caméra ou jusqu'à 4 images en mosaïque pour effectuer des comparaisons rapides.

RADIOLOGIQUE

Zen-X.

Capteur radiographique intégré à la tablette praticien, prêt à l'emploi avec câble USB. Capable d'acquérir des images haute résolution avec des doses d'irradiation minimales et disponible en deux tailles. Désinfectable, le capteur est certifié IP67 contre la pénétration d'eau et de poussière.

RXDC – technologie HyperSphere.

Appareil radiographique rétro-alvéolaire intégré à l'unité de soins avec un ordinateur de poche sans fil. D'excellentes images grâce au parallélisme obtenu grâce à la collimation de 30 cm associée à la mise au point de 0,4 mm. La tête tourne autour de la rotule pour atteindre des positions sans limites.

Moniteur LED 22".

Moniteur Full HD 16 : 9, résolution 1920 x 1080 pixels et un écran plat avec panneau IPS pour la visualisation depuis n'importe quel angle. Grâce aux sources LED, le degré de luminosité et le niveau de contraste sont optimaux.



Avantage des systèmes automatiques

HYGIÈNE

La gamme étendue de dispositifs d'hygiène minimise le risque de contamination croisée et de pollution des conduites internes. Le bénéfice de l'automatisation des procédures ajoute un élément de sécurité accrue. Depuis la console, l'opérateur a le contrôle total des cycles de désinfection, et il peut également personnaliser chaque paramètre. L'utilisation du système W.H.E., associée à

un cycle quotidien de désinfection intensive BIOSTER, a enregistré dans les liquides de refroidissement distribués par les instruments, des charges bactériennes égales à zéro. Ce résultat est certifié par les contrôles effectués par l'Université Sapienza de Rome et par le Département de Sciences de la Santé Publique et Pédiatriques de l'Université de Turin.



W.H.E.

Système certifié DVGW de désinfection en continu qui empêche la pollution due au reflux de l'eau d'alimentation de l'unité de soins et agit contre tous les contaminants aquatiques. Nous recommandons l'utilisation du Peroxy Ag⁺.

BIOSTER et FLUSHING.

BIOSTER est le système automatique de désinfection intensive des circuits internes des sprays au moyen d'un liquide antiseptique (Peroxy Ag⁺). Le logiciel contrôle chaque phase du cycle et l'opérateur peut personnaliser les paramètres. FLUSHING est un rinçage rapide des conduites des sprays. Il élimine le liquide stagnant dans les conduits et est recommandé tous les matins à l'ouverture du cabinet.



A.C.V.S.

Système automatique de lavage et désinfection du système d'aspiration. Il rend possible un traitement de désinfection entre un patient et l'autre.

S.H.S.

Dispositif d'alimentation des sprays en alternative de l'eau de réseau. Il fonctionne via un réservoir qui est rempli d'eau distillée : on évite ainsi la formation de calcaire. Très utile en cas de dureté élevée de l'eau de réseau.

O.D.R.

Mécanisme présent en série, qui émet automatiquement un flux d'air pour éloigner tout résidu liquide ou solide de la pièce à main après utilisation.



PROTECTION

Solution efficace

La solution efficace pour se prémunir des risques de contamination naît d'un concept étudié en amont par les chercheurs d'Anthos, qui conçoivent avec conscience les éléments de l'unité de soins.



Groupe crachoir.

Entièrement démontable, pour une hygiénisation rapide et efficace, il est composé d'éléments en matériaux, céramique de série ou verre en option, faciles à nettoyer et à désinfecter.



Doubles filtres.

Facilement extractibles, ils permettent d'effectuer les opérations de vidage et de nettoyage de manière pratique.



Guide-canules.

Éléments facilement démontables pour un nettoyage parfait d'une zone potentiellement critique.



Raccords rapides.

Système de décrochage pour la détersion et le remplacement éventuel.



Leviers de rappel amovibles.

Les leviers de rappel SideFlex en option s'enlèvent pour faciliter les opérations de nettoyage.



Surfaces.

La conception de toutes les surfaces se base sur la nécessité de les rendre faciles à nettoyer.



Repose-instruments extractible.

Le support des instruments sur la tablette Continental est amovible et désinfectable.



Selleries.

Résistantes, sans coutures, simples à désinfecter.



Films à usage unique.

Ils protègent les vitres des consoles praticien sur Continental, International et de la tablette assistante.



Poignée.

Poignée de la tablette Continental amovible et autoclavable.



Repose-instruments.

Support des instruments en silicone autoclavable.



Accès hydrique.

Grande ouverture sur le côté du groupe hydrique pour accéder aux systèmes intégrés.



Poignées des éclairages.

Elles sont toutes amovibles et autoclavables.

SCIALYTIQUE

Technologies de l'éclairage



Venus Plus SCT Composite.

L'éclairage scialytique à LED équipé de 4 sources lumineuses, placées à l'extérieur du corps de l'éclairage et à intensité réglable de 3 000 à 50 000 Lux, qui créent un grand spot, ce qui permet de minimiser la génération d'ombres. 2 sources lumineuses centrales sont également présentes et elles génèrent un faisceau lumineux avec des longueurs d'onde spécifiques, qui empêchent la pré-polymérisation des composites et garantissent en même temps un excellent niveau d'éclairage de la cavité buccale.

(fourni de série)



Caractérisé par un indice de rendu chromatique élevé (>90), un grand spot et des poignées amovibles et stérilisables, l'éclairage est également équipé d'un capteur infrarouge pour l'allumage/l'extinction/le réglage de l'intensité.



Venus LED MCT.

L'éclairage scialytique Venus LED MCT tourne sur trois axes pour garantir un éclairage parfait du champ opératoire dans toutes les pratiques et positions. Le capteur No Touch allume, éteint et règle l'intensité lumineuse jusqu'à 50 000 Lux. Le système innovant permet d'avoir une illumination idéale pour chaque discipline dentaire, avec 3 valeurs de température différentes : lumière chaude (4 300 K), lumière neutre (5 000 K), lumière froide (5 500 K). Fidélité absolue des couleurs grâce à un rendu chromatique qui, sur une échelle de mesure (valeur d'ICR de 0 à 100), dépasse 95.



La couleur de la lumière.

Toutes les variations de température, du chaud au neutre ou au froid et vice versa, peuvent être activées facilement et permettent de toujours obtenir la vision correcte du champ opératoire en fonction de l'intervention. Excellente efficacité scialytique du faisceau lumineux, qui minimise les ombres dans la cavité buccale.

Curing Mode.

La fonction modifie la longueur d'onde de la lumière pour empêcher la pré-polymérisation des composites tout en garantissant un excellent niveau d'éclairage.



Venus LED MCT View.

L'éclairage scialytique Venus LED MCT View intègre une caméra 4K dotée d'un logiciel PC pour capturer des images et des vidéos en très haute définition. Le système Smart Focus, basé sur des lentilles liquides, garantit une mise au point numérique rapide et optimale. En plus d'améliorer la communication praticien-patient, la caméra prend en charge la formation clinique, la documentation des soins et la divulgation académique par le biais d'enregistrements et du streaming multimédia.

La valeur d'un choix

Une vaste gamme d'accessoires disponibles permet au chirurgien-dentiste de personnaliser l'unité opérationnelle en fonction de ses besoins.



Chaque modèle contribue au maintien des niveaux d'énergie et des sensations de bien-être au cours de la journée.

Tabourets. Une gamme riche en solutions ergonomiques.

S9 est l'assise active de dernière génération en forme de selle avec mécanisme basculant. Elle permet une distribution équilibrée du poids ainsi qu'une posture correcte qui réduit l'effort sur la colonne vertébrale.

S7 pour le praticien, réglable en hauteur avec possibilité d'adapter l'angle du dossier.

S8 pour l'assistante, avec une assise de forme ronde pour faciliter les changements de position fréquents, nécessaires durant les interventions.



Stop Vacuum.

Dispositif intégré à la base du fauteuil qui permet, en appuyant dessus, l'interruption de l'aspiration sans avoir à remettre les canules.



Tête. En plus de la version réglable sur deux axes et avec blocage mécanique, le modèle Comfort est disponible avec un système de verrouillage pneumatique et mouvement sur trois axes pour un positionnement précis et sans contrainte.



Pédale de commande.

Trois ergonomies sont disponibles, chacune aussi en version sans fil. Elles permettent l'activation Chip Air/Water, l'inversion du sens de rotation du micromoteur, le mouvement du fauteuil et le rappel des positions mémorisées.

Anthos Connect



L'ensemble de la gamme des unités de soins Anthos est équipé d'un dispositif intégré qui permet la connexion à Internet. Le cabinet dentaire peut ainsi bénéficier, en temps réel, d'un service de diagnostic et d'aide technique. De plus, grâce à l'assistant virtuel numérique Di.V.A.*, le professionnel peut, grâce un simple tableau de bord, surveiller l'utilisation de l'unité de soins, l'instrumentation et les cycles de désinfection effectués. Il suffit d'ouvrir n'importe quel navigateur web pour accéder au portail des services d'assistance virtuelle numérique. Ces services, toujours actualisés et dédiés au modèle acheté, sont disponibles sur le cloud et fonctionnent sans devoir télécharger de logiciel.

*Digital Virtual Assistant



Utilisation générale.

L'utilisation de chaque unité de soins ou du parc de machines installées est surveillée. Cela permet au propriétaire du cabinet ou de la chaîne de cliniques dentaires de connaître l'utilisation effective des unités de soins ; celle-ci sera quantifiée par le capteur en option qui détecte la présence du patient ou fonction de l'allumage de l'éclairage scialytique.



Cycles de désinfection.

Di.V.A. définit la fréquence d'utilisation des systèmes d'hygiène, en enregistrant chaque mise en route pour conserver un historique des cycles de désinfection effectués. Utile en cas de contrôles au sein du cabinet, il sert également à faire une estimation des consommations et de surveiller la remise en service effective des équipements.

Utilisation des instruments.

Le tableau de bord permet de surveiller l'utilisation effective de l'instrumentation intégrée et de connaître les modes d'utilisation (conservatrice, Endo) de chaque instrument. Cela aide à comprendre s'il est nécessaire de faire la maintenance ou d'effectuer des interventions éventuelles de mise à niveau sur certaines machines.



Tutoriels et modes d'emploi.

Grâce à Di.V.A., l'utilisateur accède aux tutoriels dédiés au modèle acheté en regardant, par exemple, une vidéo qui explique comment démonter le crachoir ou remplir les réservoirs pour la désinfection. On accède ainsi directement au mode d'emploi et de maintenance en ligne qui est constamment mis à jour.